

Receptor:
Inicio

G7


AW-00081-902 Rev002

MT-00081-902

Rev Date 04/2024

Aspectos básicos de G7 | G7 muestra la información de glucosa en los dispositivos de visualización.

Sensor y aplicador

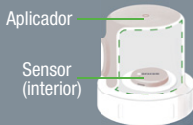

- Durante la configuración, le mostraremos cómo usar el aplicador para insertar el sensor incorporado debajo de la piel.
- El sensor envía una lectura de glucosa a su receptor u otro dispositivo de visualización cada 5 minutos.
- El sensor dura hasta 10 días con un periodo de gracia de 12 horas.

Sobreparche



Después de insertar el sensor, debe aplicar el sobreparche para mantener el sensor en el cuerpo.

Configuración del receptor

1. Inserte el sensor

- Debe insertar su sensor antes de emparejarlo con el receptor.
- Para obtener instrucciones, vaya a *Insertión del sensor* en la caja del sensor.

INICIO

1 ASPECTOS BÁSICOS DE G7

G7 muestra la información de glucosa en los dispositivos de visualización.

2. Configure el receptor

- Presione el botón **Seleccionar** durante 3 a 5 segundos para prender el receptor. (Vaya a Navegación del receptor).
- Siga las instrucciones del receptor para configurarlo. Inserte el sensor antes de emparejarlo.
- Después de insertar y emparejar, siga las pautas locales para desechar el aplicador y reciclar el empaque de Dexcom.

3. Adaptación del sensor

El temporizador de adaptación del sensor le indica cuándo comenzará a recibir lecturas y alertas.



4. Sesión del sensor

Vaya a *Uso del receptor* en la caja del receptor y a la *Guía del usuario* en línea en dexcom.com/guides para obtener más información.

Navegación del receptor

La pantalla del receptor le dirá qué botón presionar.

- Para desplazarse más rápido, mantenga presionado el botón **Desplazarse**.
- Para pasar al siguiente campo, utilice el botón **Seleccionar**.



Conecte hasta 3 dispositivos de visualización

Obtenga la información sobre su glucosa en su teléfono, su reloj inteligente y el receptor Dexcom. Puede configurar la aplicación del teléfono, el receptor, o ambos, en cualquier orden.

Revise la información de seguridad en las instrucciones del producto. Todos los gráficos son representativos. El producto puede verse diferente.



© 2024 Dexcom, Inc. Todos los derechos reservados.

Protegido por patentes **dexcom.com/patents**.

Dexcom, Dexcom Clarity, Dexcom Follow, Dexcom One, Dexcom Share y cualquier logotipo o marca de diseño son marcas registradas o marcas comerciales de Dexcom, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.



Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA
1-888-738-3646
dexcom.com

