

Sistema de monitorización continua de glucosa Dexcom G6 Pro

Uso de su Dexcom G6 Pro

Solo para pacientes visibles

- ¡Le damos la bienvenida!
- Declaraciones de seguridad
- Riesgos y beneficios
- Descripción general de la pantalla de inicio
- Alarma y alertas
- Decisiones de tratamiento
- Finalización de la sesión del sensor
- Apéndices



El Sistema de MCG Dexcom G6 Pro y los dispositivos inteligentes de la imagen se venden por separado.

dexcomG6 PRO

Tabla de contenidos

Capítulo 1: ¡Le damos la bienvenida!	2
1.1 Primeros pasos	2
Capítulo 2: Declaraciones de seguridad	3
2.1 Indicaciones de uso	3
2.2 Información importante para el usuario	4
2.3 Contraindicaciones	4
2.4 Advertencias	5
2.5 Precauciones	9
2.6 Precaución	12
Capítulo 3: Riesgos y beneficios	13
3.1 Riesgos	13
3.2 Beneficios	15
Capítulo 4: Descripción general de la pantalla de inicio	18
4.1 Medición, flecha de tendencia y gráfico de Dexcom G6 Pro	18
4.2 Navegación en la pantalla de inicio	20
Capítulo 5: Alarma y alertas	21
5.1 Alarma y alertas de nivel bajo	21
5.2 Alerta de nivel alto	22
5.3 Cambio de alertas	22
Capítulo 6: Decisiones de tratamiento	23
6.1 Cómo leer las flechas de tendencia	23
6.2 Práctica en la toma de decisiones de tratamiento	23
Capítulo 7: Finalización de la sesión del sensor	27
7.1 Extracción del sensor	27
Apéndice A: Resolución de problemas	28
A.1 Precisión: las mediciones del sensor G6 Pro no coinciden con los valores del medidor	28
A.2 Parche adhesivo	29
A.3 Alarma/Alertas: oírlas	30
A.4 Alertas comunes	31
A.5 Finalizar la sesión del sensor antes de tiempo	34
A.6 Espacio vacío en el gráfico	34
Apéndice B: Pasar por seguridad	35
Índice	36

Capítulo 1:

¡Le damos la bienvenida!

¡Felicitaciones! Su profesional de salud cree que usted es un gran candidato para probar el Sistema de monitorización continua de glucosa Dexcom G6 Pro (Dexcom G6 Pro) para una sesión del sensor completa. Durante este tiempo, puede observar cómo sus acciones afectan sus mediciones de glucosa, ver sus tendencias de glucosa y mucho más.

1.1 Primeros pasos

Después de su visita

Durante su visita al consultorio, su profesional de salud insertó el sensor, conectó el transmisor y revisó con usted el Manual del paciente visible.

El folleto le guiará en la configuración de la aplicación, incluyendo el ingreso de los niveles de alerta alto y bajo recomendados y el número de serie del transmisor (NS).

También tiene información sobre cómo tomar decisiones de tratamiento, a quién llamar si tiene preguntas, su próxima visita, etc.

Para obtener aún más información, visite dexcom.com/guides para ver la Guía del usuario del Sistema Dexcom G6 Pro.

Capítulo 2:

Declaraciones de seguridad

2.1 Indicaciones de uso

El Sistema de monitorización continua de glucosa Dexcom G6 Pro (Sistema de Dexcom G6 Pro) es un dispositivo de monitorización continua de glucosa en tiempo real indicado para el control de la diabetes en personas a partir de los 2 años de edad en un entorno domiciliario mientras están bajo la supervisión de un profesional de salud. El Sistema Dexcom G6 Pro tiene como objetivo sustituir la prueba de glucosa en sangre por punción en el dedo para tomar decisiones de tratamiento de la diabetes. La interpretación de los resultados del Sistema Dexcom G6 Pro debe basarse en las tendencias de la glucosa y en varias mediciones de glucosa secuenciales en el tiempo.

El Sistema Dexcom G6 Pro también puede utilizarse como un dispositivo de registro retrospectivo de la glucosa indicado para evaluar la variabilidad de la glucemia en personas a partir de los 2 años de edad en un entorno domiciliario mientras están bajo la supervisión de un profesional de salud. La interpretación retrospectiva de los datos registrados por el Sistema Dexcom G6 Pro debe ser realizada únicamente por un profesional de salud.

El Sistema Dexcom G6 Pro ayuda a detectar variaciones en los niveles de glucosa facilitando los ajustes del plan de cuidados. El Sistema Dexcom G6 Pro también está diseñado para comunicarse de forma autónoma con dispositivos conectados digitalmente. El Sistema Dexcom G6 Pro se puede usar solo o junto con estos dispositivos médicos conectados digitalmente con el fin de controlar la diabetes o evaluar la variabilidad glucémica.

2.2 Información importante para el usuario

No utilizar el Dexcom G6 Pro y sus componentes de acuerdo con las instrucciones de uso y no considerar correctamente todas las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones puede hacer que no se presente una hipoglucemia grave (glucosa baja en sangre) o hiperglucemia (glucosa alta en sangre) o que tome una decisión de tratamiento que puede resultar en una lesión.

Si las alertas y mediciones de glucosa de su Dexcom G6 Pro no coinciden con sus síntomas o expectativas, use el valor de glucosa en sangre de una punción en el dedo de su medidor de glucosa en sangre para tomar decisiones de tratamiento de la diabetes.

Busque atención médica cuando sea apropiado. Revise las instrucciones del producto antes de usar el Dexcom G6 Pro. Las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones, cuidados y otra información importante para el usuario pueden encontrarse en las instrucciones del producto incluidas, o adjuntas, en Dexcom G6 Pro. Consulte con su profesional de salud cómo la información que se muestra en el Dexcom G6 Pro puede ayudarle a controlar su diabetes.

Las instrucciones del producto contienen información importante sobre la resolución de problemas del Dexcom G6 Pro y sobre las características de rendimiento del sistema.

2.3 Contraindicaciones

No compatible con RMN/TC/Diatermia

Evite usar su MCG (sensor, transmisor o dispositivo inteligente) durante una resonancia magnética (RMN), una tomografía computarizada (TC) o un tratamiento con calor eléctrico de alta frecuencia (diatermia).

El Dexcom G6 Pro no fue probado en esas situaciones. Los campos magnéticos y el calor pueden dañar los componentes del Dexcom G6 Pro, lo que puede ocasionar mediciones inexactas de glucosa del sensor Dexcom G6 Pro (mediciones del Dexcom G6 Pro) o impedir la emisión de alertas. Sin las mediciones o notificaciones de alarma/alerta del Dexcom G6 Pro, puede llegar a pasar por alto un evento grave de glucosa alta o baja.

2.4 Advertencias

Lugar de inserción: ¿Vientre o glúteos?

Todos los pacientes pueden realizar la inserción en el vientre (abdomen). Los pacientes de 2 a 17 años también pueden optar por la parte superior de los glúteos. Busque un lugar en el vientre, el dorso del brazo o la parte superior de los glúteos ligeramente rellena.

El sensor no está probado ni aprobado para colocarse en otro lugar. Consulte con su profesional de salud cuál es la mejor zona para usted.

Revise

Si el transmisor está dañado o agrietado, no lo utilice. Un transmisor en mal estado podría provocar lesiones por descargas eléctricas e impedir el funcionamiento correcto del Dexcom G6 Pro.

Lugar de almacenamiento

Puede guardar los sensores a temperatura ambiente o en el refrigerador, siempre que sea a una temperatura de entre 36°F y 86°F. No los guarde en el congelador.

Lea los materiales para el usuario

Antes de utilizar su Dexcom G6 Pro, lea atentamente los materiales incluidos. De lo contrario, podría:

- utilizar el Dexcom G6 Pro incorrectamente;
- encontrar la información del Dexcom G6 Pro difícil de comprender;
- afectar la eficacia.

Preste atención a los síntomas de niveles bajos/altos

No debe ignorar cómo se siente. Si las alertas y las mediciones de glucosa del Dexcom G6 Pro no coinciden con los síntomas, use su medidor de glucosa en sangre para tomar decisiones de tratamiento de la diabetes o, si es necesario, busque atención médica inmediata.

Si tiene dudas, utilice su medidor.

Sin números ni flechas, no base la decisión de tratamiento en la MCG

En el caso de que Dexcom G6 Pro no muestre un número o una flecha o si las mediciones no coincidan con los síntomas, utilice su medidor para tomar decisiones de tratamiento de la diabetes.

Sin números ni flechas, no tome decisiones de tratamiento. Si tiene dudas, utilice su medidor.

Evite utilizar el Dexcom G6 Pro si está embarazada, recibe diálisis o padece una enfermedad grave.

Se desconoce cómo las diferentes condiciones o medicamentos asociados a estas poblaciones pueden afectar el rendimiento del sistema. Las mediciones del Dexcom G6 Pro podrían ser inexactas en estas poblaciones.

Siga las instrucciones de uso del G6 Pro. De lo contrario, podría sufrir un evento grave de glucosa alta o baja.

Compruebe la configuración

Cuando utilice su dispositivo inteligente, debe confirmar que su volumen esté alto, que su teléfono no esté silenciado y que no tenga auriculares conectados. Si su volumen no está alto, el dispositivo está silenciado o hay auriculares conectados, no oirá el sonido de ninguna notificación, incluidas las alarmas importantes.

Cuando tenga los auriculares conectados a su Android®, las alarmas/alertas sonarán a través de los auriculares y el altavoz. En su Apple®, solo sonarán en los auriculares.

Algunas notificaciones están silenciadas durante la primera notificación visual y vibratoria y luego emiten un sonido en la segunda notificación. Si no borra la alerta, se repite a la mitad del volumen durante 5 minutos y a todo volumen luego de 10 minutos.

Las vibraciones del dispositivo inteligente para las alertas no son diferentes de las vibraciones que se originan en otras fuentes distintas de la aplicación Dexcom MCG. (La notificación mediante vibración solo está disponible en los dispositivos inteligentes con funcionalidad vibratoria).

Si el dispositivo inteligente está silenciado solo estas notificaciones emiten un sonido:

Alarma de glucosa:

- Valor bajo urgente

Alertas del sistema:

- El sensor falló
- El transmisor falló
- La aplicación se detuvo

Los usuarios de Android deben activar el permiso No molestar para usar la aplicación.

Bluetooth®

El transmisor se comunica con su aplicación mediante *Bluetooth*. Asegúrese de que el *Bluetooth* de su dispositivo inteligente esté activado. De lo contrario, no recibirá alarmas/alertas o información de MCG.

Notificaciones

Asegúrese de que la configuración del dispositivo inteligente permita visualizar las notificaciones de la aplicación Dexcom en el bloqueo de pantalla. Así podrá ver las notificaciones sin tener que desbloquear su teléfono.

Apple®: Durante la configuración del Dexcom G6 Pro, habilite las notificaciones de la aplicación Dexcom para no recibir alarmas/alertas.

Uso de la aplicación: El dispositivo inteligente puede cerrar la aplicación Dexcom automáticamente cuando otras aplicaciones se encuentran en uso, como un juego, o si hay demasiadas aplicaciones abiertas. Si la aplicación Dexcom se cierra, no obtendrá la información de glucosa del sensor. Compruebe de vez en cuando que la aplicación Dexcom está abierta.

Batería: La aplicación siempre debe estar ejecutándose en segundo plano y puede agotar la batería de su dispositivo inteligente. Mantenga la batería cargada.

Compatibilidad: Dexcom comprueba la compatibilidad de la aplicación con el sistema operativo del dispositivo inteligente para garantizar su funcionamiento. Antes de actualizar su dispositivo inteligente o el sistema operativo, siempre consulte dexcom.com/compatibility.

Las actualizaciones automáticas de la aplicación o del sistema operativo de su dispositivo pueden cambiar la configuración o cerrar la aplicación.

Hora

Deje que la fecha y la hora de su dispositivo inteligente se actualicen automáticamente cuando viaje a lugares con otros husos horarios o para cambiar entre el horario de invierno y el de verano.

No cambie manualmente la hora de su dispositivo inteligente. Podría aparecer una hora incorrecta en la pantalla de tendencias y hacer que la aplicación deje de mostrar datos.

Siga las instrucciones de uso de Dexcom G6 Pro. De lo contrario, podría sufrir un evento grave de glucosa alta o baja.

Siga las instrucciones de uso

El transmisor es una pieza pequeña y supone un peligro de asfixia, especialmente para los niños.

Uso del medidor durante la adaptación del sensor

Cuando se inicia un sensor nuevo, no se obtendrán ninguna medición ni alarma/alertas del Dexcom G6 Pro. Utilice el medidor para tomar decisiones de tratamiento durante las 2 horas que dura el período de adaptación del sensor.

Siga las instrucciones de uso de Dexcom G6 Pro. De lo contrario, podría sufrir un evento grave de glucosa alta o baja.

El alambre se rompe

Compruebe que los alambres del sensor no estén rotos ni se desacoplen. Uno de los alambres del sensor podría quedarse bajo la piel. Si esto sucede, contáctese con nuestro soporte técnico las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Si un alambre del sensor queda bajo su piel y no puede verlo, evite extraerlo. Comuníquese con su profesional de salud. También busque ayuda médica profesional en caso de presentar síntomas de infección o inflamación (enrojecimiento, hinchazón o dolor) en el lugar de inserción.

2.5 Precauciones

No utilizar después de la fecha de vencimiento

No inicie un sensor después de su fecha de vencimiento porque puede arrojar resultados incorrectos. La fecha de vencimiento está en formato AAAA-MM-DD (año-mes-día) en la etiqueta del paquete del sensor, al lado del símbolo del reloj de arena.

Revise el paquete

Descarte el sensor si el paquete estéril está dañado o abierto, ya que podría provocarle una infección.

Piel limpia y seca

Lave y seque sus manos, luego póngase los guantes antes de insertar el sensor al paciente.

Para prevenir infecciones, limpie el lugar de inserción con toallitas humedecidas en alcohol. Espere hasta que la piel esté seca para insertar el sensor. Si el lugar de inserción no está limpio y completamente seco, corre el riesgo de sufrir una infección o de que el soporte del transmisor no se adhiera bien.

Asegúrese de que la piel no tenga repelente de insectos, protector solar, perfume o loción.

Lugar de inserción: Puntos a tener en cuenta

No abra el paquete hasta que esté listo para usar.

Mantenga la protección de seguridad puesta hasta que coloque el aplicador del Dexcom G6 Pro en la piel del paciente. Si la despega primero, podría presionar accidentalmente el botón que inserta el sensor antes de lo previsto y lastimar al paciente.

Elija un lugar de inserción distinto cuando cambie de sensor. Usar el mismo sitio con demasiada frecuencia podría no permitir que la piel sane, provocando cicatrices o la irritación de la misma.

La colocación del sensor es importante.

Elija un lugar:

- al menos a 3 pulgadas de cualquier equipo de infusión de la bomba de insulina o sitio de inyección;
- alejado de la cintura, cicatrices, tatuajes, irritaciones y huesos;
- sin riesgo de ser golpeado, presionado o aplastado mientras duerme.

Siga las instrucciones de uso de Dexcom G6 Pro. De lo contrario, el paciente podría sufrir un evento grave de glucosa alta o baja.

Utilice el transmisor y el sensor correctos

Los componentes del Dexcom G6 Pro no son compatibles con ningún producto Dexcom G6 Pro anterior. No mezcle transmisores ni sensores de diferentes generaciones.

Evite utilizar protector solar y repelente de insectos

Algunos productos para la piel, como los protectores solares y los repelentes de insectos, pueden agrietar el plástico del Dexcom G6 Pro. Antes de usar su Dexcom G6 Pro, asegúrese de que no haya grietas en su receptor, transmisor ni en el soporte del transmisor. Si encuentra una grieta, contáctese con el Soporte técnico.

No permita que el Dexcom G6 Pro entre en contacto con repelentes de insectos, protectores solares, perfumes o lociones. Después de utilizar productos para la piel, lávese las manos antes de tocar el Dexcom G6 Pro. Si alguno de estos productos para la piel entrara en contacto con el Dexcom G6 Pro, límpielo de inmediato con un paño limpio.

Pasar por controles de seguridad

Cuando lleve puesto el Dexcom G6 Pro, debe solicitar que le pasen un detector de varilla, o que le realicen una inspección manual y visual en lugar de pasar por escáneres corporales con tecnología de imagen avanzada (AIT) (también llamados escáneres de ondas milimétricas), ni tampoco deposite cualquier parte del Dexcom G6 Pro en el equipo de rayos X de equipajes.

Puede llevar puesto el Dexcom G6 Pro al pasar por un detector de metales de arco.

¿No sabe que tipo de máquina es? Opte por la opción más segura: solicite al oficial de la TSA que le pasen un detector de varilla o que le realicen una inspección total del cuerpo.

Riesgos de las sustancias que pueden interferir

Acetaminofén

En las generaciones anteriores de los sistemas Dexcom MCG (G4/G5), el acetaminofén podía afectar las mediciones del sensor, haciéndolas parecer más altas de lo que realmente eran. Sin embargo, con el Dexcom G6 Pro, puede tomar una dosis de hasta 1 gramo (1,000 mg) como máximo de acetaminofén cada 6 horas y seguir basando sus decisiones de tratamiento en las mediciones del Dexcom G6 Pro. Tomar una dosis superior a la máxima de acetaminofén (por ejemplo, > 1 gramo cada 6 horas en adultos) puede alterar las mediciones del Dexcom G6 Pro y hacer que presente valores más elevados de los reales.

Hidroxiurea

La hidroxiurea es un medicamento utilizado en el tratamiento de enfermedades como el cáncer y la anemia de células falciformes; se sabe que interfiere con las lecturas de su sensor. Si está tomando hidroxiurea, las mediciones de glucosa del sensor serán más altas que su glucosa real, lo que podría provocar la omisión de alertas de hipoglucemia o errores en las decisiones del control de la diabetes, como administrarse una dosis más alta de insulina debido a valores de glucosa del sensor falsamente altos. El nivel de imprecisión depende de la cantidad de hidroxiurea en el cuerpo. No utilice su Sistema de Dexcom MCG para tomar decisiones de tratamiento de la diabetes si está tomando hidroxiurea.

Siga las instrucciones de uso de Dexcom G6 Pro. De lo contrario, podría sufrir un evento grave de glucosa alta o baja.

Decisiones de tratamiento

Utilice la medición y la flecha de tendencia del Dexcom G6 Pro para tomar decisiones de tratamiento.

Conozca su sistema

No confíe en la aplicación del Dexcom G6 Pro hasta que no sepa cómo usarla y el *Bluetooth* de su dispositivo.

Mantenga el transmisor cerca del dispositivo de visualización

Mantenga una distancia de separación de no más de 20 pies entre el transmisor y el dispositivo de visualización. También procure que no haya obstáculos, como paredes o metales, de por medio. De lo contrario, podrían desvincularse. Si hay agua entre el transmisor y el dispositivo de visualización (por ejemplo, mientras se está bañando o nadando), acérquelos más. El rango se reduce porque *Bluetooth* no funciona correctamente en contacto con el agua.

¿Funciona su dispositivo inteligente?

Si el dispositivo inteligente está desactivado (apagado), no mostrará las mediciones o alarma/alertas del Dexcom G6 Pro. Asegúrese de que el dispositivo de visualización esté encendido, la batería esté cargada, la pantalla no esté rota y el altavoz funcione.

Siga las instrucciones de uso de Dexcom G6 Pro. De lo contrario, podría sufrir un evento grave de glucosa alta o baja.

Compruebe los dispositivos periféricos

¿Utiliza auriculares con su dispositivo inteligente? ¿Altavoces o un reloj inteligente conectados por *Bluetooth*? Cuando use periféricos, tenga en cuenta que puede recibir sus alarmas/alertas en un solo dispositivo o periférico, no en todos. Después de conectar cualquiera de estos dispositivos periféricos, asegúrese de que la configuración del dispositivo inteligente le permita continuar recibiendo alarmas o alertas.

2.6 Precaución

La ley de los EE. UU. restringe la venta del Dexcom G6 Pro por parte de un médico o por orden del mismo.

Capítulo 3:

Riesgos y beneficios

3.1 Riesgos

Los riesgos relacionados con el uso de Dexcom G6 Pro son los siguientes:

- problemas con la inserción del sensor;
- irritación local de la piel a causa del parche adhesivo.

Los riesgos adicionales al utilizar la aplicación del Dexcom G6 Pro son:

- no recibir alarmas/alertas;
- tomar decisiones de tratamiento basadas en el Dexcom G6 Pro cuando no debería hacerlo.

Esta sección cubre cada uno de esos riesgos en detalle.

Siga las instrucciones del sistema. De lo contrario, podría sufrir un evento grave de glucosa alta o baja.

Riesgos relacionados con la inserción del sensor

Es poco común, pero la inserción del sensor puede causar infección, sangrado o dolor. Solo unos pocos pacientes de los estudios clínicos tuvieron un ligero enrojecimiento e hinchazón.

Existe una remota posibilidad de que un alambre del sensor se rompa o se desacople y quede bajo la piel. Un alambre del sensor roto o desprendido que esté esterilizado no suele representar un riesgo médico importante. Si un alambre del sensor que esté roto o desprendido se le queda debajo de la piel, comuníquese con su profesional de salud y con soporte técnico (las 24 horas del día, los 7 días de la semana) al:

TechSupport@dexcom.com

Línea gratuita: **1.888.738.3646**

Teléfono: **1.858.200.0200**

No recibir alarmas/alertas

Si está utilizando el Sistema Dexcom G6 Pro en tiempo real y no está recibiendo sus alarmas/alertas, podría tener un nivel gravemente bajo o alto de glucosa sin saberlo.

Comprobar el dispositivo inteligente:

- **Batería cargada:** Si la batería del dispositivo inteligente está agotada, no obtendrá mediciones ni alarmas/alertas.
- **Aplicación activada:** mantener la aplicación activada para obtener mediciones o alarmas/alertas.
- **Alertas activadas:** dejar la función de alerta activada para recibir alarmas/alertas.
- **Volumen alto:** mantener el volumen lo suficientemente alto para oír las alarmas/alertas.
- **El altavoz y las vibraciones funcionan:** Si el altavoz o las vibraciones no funcionan, no oírás ni sentirás sus alarmas/alertas.
- **Dentro del rango:** mantener su dispositivo inteligente a no más de 6 metros del transmisor, sin obstáculos entre ellos. Tienen que estar a esa distancia para comunicarse. Si no están dentro del rango, no obtendrá mediciones ni alarmas/alertas.
- **Sin errores en el sistema:** Si recibe un error del sistema, como No hay mediciones, Error del sensor o Pérdida de señal, no obtendrá mediciones ni alarmas/alertas.
- **Durante la adaptación y luego de que finalice una sesión:** No recibirá alarmas/alertas ni mediciones del Dexcom G6 Pro durante la adaptación de 2 horas o luego de que finalice una sesión del sensor.

Decisiones de tratamiento basadas en el Dexcom G6 Pro

Puede usar su Dexcom G6 Pro para tratar una dosis baja o una dosis alta en todas las situaciones, excepto algunas. Consulte la tabla a continuación:

Situación	Qué herramienta usar para la decisión de tratamiento
La manera en que se siente coincide con la medición del Dexcom G6 Pro	Use su MCG para tomar una decisión de tratamiento
La manera en que se siente no coincide con la medición del MCG de su Dexcom G6 Pro	Realice una punción en el dedo con su medidor de glucosa en sangre para tomar una decisión de tratamiento
Su MCG muestra un número y una o varias flechas de la glucosa del sensor	Use su MCG para tomar una decisión de tratamiento
La pantalla del MCG no muestra la medición (número) o la(s) flecha(s) del Dexcom G6 Pro, o ninguna de las dos	Realice una punción en el dedo con su medidor para tomar una decisión de tratamiento

3.2 Beneficios

Estos son algunos de los beneficios de utilizar el Dexcom G6 Pro:

- conocer las tendencias;
- tomar decisiones de tratamiento basadas en el uso de su Dexcom G6 Pro;
- controlar su diabetes sin la necesidad de realizar punciones en el dedo a diario;
- recibir alertas de mediciones bajas y altas;
- determinar con qué frecuencia su glucosa es alta, baja o se encuentra dentro del rango normal.

Esta sección cubre cada uno de esos beneficios en detalle.

Conocer sus tendencias

El Dexcom G6 Pro envía una medición cada 5 minutos. También proporciona informes y visualizaciones de su información para que pueda detectar y reflexionar sobre tendencias, patrones y cómo responde su cuerpo a diferentes cosas, como el ejercicio, el estrés o los alimentos que ha ingerido. Esto le brinda una imagen más completa de su glucosa y le permite ver cómo sus hábitos diarios afectan sus tendencias de glucosa.

Tomar decisiones de su tratamiento basadas en el uso del Dexcom G6 Pro

Puede usar la medición de su Dexcom G6 Pro y la flecha de tendencia para tomar decisiones de tratamiento, como tratar una dosis baja o una dosis alta. Consulte '¿Puedo tomar decisiones respecto al tratamiento con Dexcom G6 Pro?', 'Sin números ni flechas, no base la decisión de tratamiento en la MCG' y 'Decisiones de tratamiento basadas en el uso del Dexcom G6 Pro' para obtener más información. Con Dexcom G6 Pro, no es necesario realizar punciones en los dedos para calibrar el sistema o para tomar decisiones de tratamiento (siempre y cuando sus síntomas coincidan con las mediciones). Esto puede reducir el dolor y las molestias del exceso de punciones en el dedo (Aleppo 2017) y los posibles errores generados por una calibración inexacta.

Ayuda a controlar su diabetes

Las funciones de alarma/alertas lo mantienen al tanto de sus niveles de glucosa. Las alarmas/alertas le notifican cuando su nivel de glucosa es muy alto o muy bajo. Esto le permite tomar medidas para evitar que la glucosa baje o suba demasiado (Pettus 2015).

Algunas personas perciben un aumento en su calidad de vida y tranquilidad cuando usan el MCG en tiempo real (Polonsky 2017). La información sobre la glucosa proporcionará una visión del estado de su control de glucosa y los patrones que usted y su médico observen

pueden ayudar a tomar mejores decisiones de tratamiento.

Referencias

Aleppo, Grazia, Katrina Ruedy, Tonya Riddlesworth, Davida Kruger, Anne Peters, Irl Hirsch, Richard Bergenstal, Elena Toschi, Andrew Ahmann, Viral Shah, Michael Rickels, Bruce Bode, Athena Philis-Tsimikas, Rodica Pop-Busui, Henry Rodriguez, Emily Eyth, Anuj Bhargava, Craig Kollman, and Roy Beck. 2017. "Replace-BG: a randomized trial comparing continuous glucose monitoring with and without routine blood glucose monitoring in well-controlled adults with type 1 diabetes." *Diabetes Care*. 40(4): 538-545. doi: 10.2337/dc16-2482.

Beck, Roy, Tonya Riddlesworth, Katrina Ruedy, Andrew Ahmann, Richard Bergenstal, Stacie Haller, Craig Kollman, Davida Kruger, Janet McGill, William Polonsky, Elena Roschi, Howard Wolpert, and David Price for the DIAMOND Study Group. 2017. "Effect of continuous glucose monitoring on glycemic control in adults with type 1 diabetes using insulin injections: the DIAMOND randomized clinical trial." *JAMA*. 317(4):371-378. doi:10.1001/ jama.2016.19975.

Lind, Marcus, William Polonsky, Irl Hirsch, Tim Heise, Jan Bolinder, Sofia Dahlqvist, Erik Schwarz, Arndis Finna Olafsdottir, Anders Frid, Hand Wedel, Elsa Ahlen, Thomas Nystom, and Jarl Hellman. 2017. "Continuous glucose monitoring vs conventional therapy for glycemic control in adults with type 1 diabetes treated with multiple daily insulin injections: the gold randomized clinical trial." *JAMA*. 317(4):379-387. doi:10.1001/ jama.2016.19976.

Pettus, Jeremy, David Price, and Steven Edelman. 'How patients with type 1 diabetes translate continuous glucose monitoring data into diabetes management decisions." *Endocr Pract*. 21(6):613-620. doi: 10.4158/ EP14520.OR.

Vigersky, Robert, Shrivastav, Maneesh. 2017. "Role of continuous glucose monitoring for type 2 diabetes management and research". *Journal of Diabetes and Its Complications* 31(1):280-287. Doi: 10.1016/j. jdiacomp.2016.10.007.

Capítulo 4:

Descripción general de la pantalla de inicio

Pasa la mayor parte del tiempo en la pantalla de inicio. Le brinda las mediciones de glucosa del sensor del Dexcom G6 Pro (mediciones del Dexcom G6 Pro) e información de tendencias y lo lleva a otras funciones del Dexcom G6 Pro.

La próxima sección indica todas las funciones de la pantalla de inicio. Más adelante repasaremos cómo interpretar las mediciones, las flechas de tendencia y el gráfico de su Dexcom G6 Pro, y también cómo navegar a otras funciones.

4.1 Medición, flecha de tendencia y gráfico de Dexcom G6 Pro

Dónde se encuentra ahora

En la pantalla de inicio, los números y el color le indican dónde se encuentra ahora. El número es la medición de su G6. Esta se actualiza cada 5 minutos. El color de fondo del número muestra si su medición de glucosa Dexcom G6 Pro es baja, alta o está dentro de su rango ideal.



Amarillo = Alto



Gris = En el rango ideal



Rojo = Bajo

Hacia dónde va

Para saber hacia dónde se dirige, mire sus flechas de tendencia.

Flechas de tendencia	Hacia dónde se dirige su glucosa	
	Estable	<p>Cambio hasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 mg/dL por minuto • 30 mg/dL en 30 minutos
	Subiendo o bajando lentamente	<p>Cambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entre 1 y 2 mg/dL por minuto • Hasta 30 a 60 mg/dL en 30 minutos
	Subiendo o bajando	<p>Cambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entre 2 y 3 mg/dL por minuto • Hasta 60 a 90 mg/dL en 30 minutos
	Subiendo o bajando rápidamente	<p>Cambio a más de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 mg/dL por minuto • 90 mg/dL en 30 minutos
	No hay flecha	No se puede determinar la tendencia

Problemas en la pantalla de inicio

Es posible que a veces no obtenga las mediciones del Dexcom G6 Pro o no vea un número, solo un mensaje. En esos momentos no recibirá alarmas/alertas.

Lo que ve	Significado
Un icono circular con un fondo rojo y un triángulo blanco a la derecha. El texto 'Bajo' está en blanco y 'mg/dL' en rojo más pequeño.	Su medición de glucosa del Dexcom G6 Pro está por debajo de los 40 mg/dL
Un icono circular con un fondo amarillo y un triángulo negro a la derecha. El texto 'Alto' está en negro y 'mg/dL' en amarillo más pequeño.	Su medición de glucosa del Dexcom G6 Pro está por encima de los 400 mg/dL
<div>Aplicación <div>Alerta de pérdida de señal No recibirá alertas, alarmas ni mediciones de glucosa del sensor. ACEPTAR</div></div>	Un mensaje de error significa que su Dexcom G6 Pro no está funcionando y no obtendrá alarmas/alertas ni mediciones del Dexcom G6 Pro.

4.2 Navegación en la pantalla de inicio

Puede acceder a otras funciones del Dexcom G6 Pro mediante los iconos de navegación.

Navegación de la aplicación

Ícono de navegación	Significado
Configuración Un icono de un engranaje azul.	Toque para: <ul style="list-style-type: none">• Personalice su MCG y configuraciones de alerta• Obtener información de soporte• Y más
Eventos Un icono de un libro azul abierto.	Toque para agregar o eliminar estos eventos: <ul style="list-style-type: none">• Carbohidratos• Insulina• estrés o dolencia;• Ejercicio

Capítulo 5:

Alarma y alertas

Su alarma y alertas lo ayudan a mantenerse dentro de su rango ideal. Le informan cuando:

- se encuentra fuera del rango ideal;
- está en 55 mg/dL o por debajo.

Mantenga sus alertas activadas: son una parte importante de la toma de decisiones de tratamiento del Dexcom G6 Pro. Consulte con su profesional de salud para saber cuál es la mejor configuración de Alerta de nivel bajo y alto para usted.

5.1 Alarma y alertas de nivel bajo

Lo que ve	Significado
Aplicación <div>Alarma de valor bajo urgente de glucosa La medición de glucosa del sensor es urgentemente baja. ACEPTAR</div>	Alarma de valor bajo urgente Le permite saber cuando la glucosa de su sensor es igual o menor que 55 mg/dL. No puede cambiar ni desactivar su Alarma de nivel bajo urgente.
Aplicación <div>Alerta de glucosa baja La medición de glucosa del sensor es baja. ACEPTAR</div>	Alerta de glucosa baja (Alerta de nivel bajo) Le permite saber que la lectura de su Dexcom G6 Pro está por debajo de su rango ideal. Puede cambiar su Alerta de nivel bajo: <ul style="list-style-type: none">• Activada de forma predeterminada; se puede desactivar• Elija el nivel de alerta y el sonido

5.2 Alerta de nivel alto

Lo que ve	Significado
<div><div><div>Alerta de glucosa alta</div><div>La medición de glucosa del sensor es alta.</div><div>ACEPTAR</div></div></div>	<div><div>Alerta de glucosa alta (Alerta de nivel alto)</div><div>Le permite saber cuándo la lectura de su sensor Dexcom G6 Pro está por encima de su rango ideal.</div><div>Puede cambiar su Alerta de nivel alto:</div><div><ul style="list-style-type: none">Activada de forma predeterminada; se puede desactivarElija el nivel de alerta y el sonido</div></div>

5.3 Cambio de alertas

Hable con su profesional de salud antes de cambiar la configuración de sus alertas. Pueden ayudarle a encontrar la mejor configuración para controlar su diabetes sin recibir demasiadas alertas. Vaya a **Configuración > Alertas** y toque una alerta para cambiarla.

Aplicación

< Configuración		Alertas
Valor bajo urgente	55 mg/dL	>
Bajo	70 mg/dL	>
Alto	250 mg/dL	>
Pérdida de señal	Activa	>
Falta de mediciones	Activa	>

Capítulo 6:

Decisiones de tratamiento



Gracias al MCG Dexcom G6 Pro (G6), puede tomar decisiones de tratamiento sin usar el medidor de glucosa en sangre.

Pero a veces deberá usar el medidor de glucosa en sangre en lugar del Dexcom G6 Pro. Y otras es mejor no actuar, solo observar y esperar.

Trabaje con su profesional de salud para decidir cómo actuar al momento de tomar decisiones de tratamiento.

6.1 Cómo leer las flechas de tendencia

Las flechas de tendencia lo ayudan a decidir cuánto dosificar.



Flecha hacia arriba: Administre un poco más de insulina



Flecha hacia abajo: Administre un poco menos de insulina

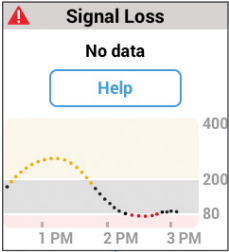
6.2 Práctica en la toma de decisiones de tratamiento

Utilice los ejemplos a continuación para poner en práctica la toma de decisiones de tratamiento.

Primero, analícelos con su profesional de salud y evalúe:

- Cuándo necesita usar su medidor
- Cómo puede utilizar su Dexcom G6 Pro
- Cuándo es mejor observar y esperar en lugar de actuar

Situación	Solución
<p>Primeras horas del día:</p> <p>La Alerta de nivel bajo lo despierta.</p> <p>Usted ve:</p> 	<p>Tenga en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número y flecha: ve ambos. • Número: su glucosa es baja: 80 mg/dL. • Flecha que baja lentamente: la glucosa está bajando de 1 a 2 mg/dL por minuto. <p>Qué debe hacer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilice su G6 Pro para aplicar el tratamiento normalmente.
<p>Hora de desayunar:</p> <p>Noventa minutos después de sentarse a desayunar.</p> <p>Usted ve:</p> 	<p>Tenga en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número y flecha: ve ambos. • Flecha hacia arriba: la glucosa está subiendo 2 mg/dL por minuto. <p>Qué debe hacer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilice su Dexcom G6 Pro para aplicar el tratamiento. Administre su dosis normal y agregue un poco más debido a la flecha hacia arriba.

Situación	Solución
<p>Después de desayunar:</p> <p>Pasados treinta minutos desde la administración de la dosis para compensar el desayuno, recibe una Alerta de nivel alto.</p> <p>Usted ve:</p> 	<p>Tenga en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Insulina: se inyectó insulina hace menos de una hora. Se necesita tiempo para que haga efecto. <p>Qué debe hacer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nada. Observe y espere para evitar la acumulación de insulina. No aplique ningún tratamiento por al menos otra hora y media.
<p>Una hora más tarde:</p> <p>Observó y esperó.</p> <p>Usted ve:</p> 	<p>Tenga en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Insulina: la insulina administrada durante el desayuno llevo su nivel de glucosa a su rango ideal. <p>Qué debe hacer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nada. No se necesita tratamiento.
<p>Media mañana:</p> <p>Está por comer algo a media mañana</p> <p>Usted ve:</p> 	<p>Tenga en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> No hay número ni flecha: no tiene ninguno. Observe el espacio vacío entre las mediciones del Dexcom G6 Pro. Mensaje de error: no está obteniendo mediciones del Dexcom G6 Pro. <p>Qué debe hacer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Use su medidor para tomar decisiones de tratamiento.

Situación	Solución
<p>Hora de almorzar:</p> <p>Tres horas después, está por administrarse la dosis para el almuerzo.</p> <p>Usted ve:</p> 	<p>Tenga en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número y flecha: ve ambos. • Flecha hacia abajo: su glucosa está bajando de 2 a 3 mg/dL por minuto. <p>Qué debe hacer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilice su Dexcom G6 Pro para aplicar el tratamiento. Adminístrese un poco menos debido a la flecha hacia abajo.
<p>Media tarde:</p> <p>Pasaron 3 horas desde el almuerzo.</p> <p>Usted ve:</p> 	<p>Tenga en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hay un número, pero ninguna flecha: no aparece ninguna flecha. <p>Qué debe hacer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Use su medidor para tomar decisiones de tratamiento.
<p>Tarde-noche:</p> <p>Justo antes de la cena, tiembla y suda un poco.</p> <p>Usted ve:</p> 	<p>Tenga en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Síntomas y medición de glucosa: sus síntomas no coinciden con las mediciones de su sensor Dexcom G6 Pro. <p>Qué debe hacer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lávese bien las manos y hágase una punción en el dedo. Si el valor del medidor coincide con sus síntomas, utilícelo para las decisiones de tratamiento.

Capítulo 7: Finalización de la sesión del sensor

Las sesiones del sensor duran 10 días.

El Dexcom G6 Pro le avisa cuánto tiempo le queda a su sesión con una anticipación de 24 horas, 6 horas, 2 horas y, finalmente, 30 minutos. Puede finalizar su sesión en cualquier momento durante este periodo o esperar a que la alerta final le indique que su sesión ha finalizado.

Recuerde, una vez finalizada la sesión del sensor, no se mostrarán mediciones del Dexcom G6 Pro. Asegúrese de devolver el transmisor dentro de los 30 días siguientes a la inserción del sensor.

7.1 Extracción del sensor

Quítese el sensor del cuerpo.

1	<p>La sesión de prueba terminó</p> <p>Despegue el sensor ahora</p> <p>No recibirá más alarmas, alertas ni mediciones de glucosa del sensor.</p> <p>No necesita esperar hasta que vaya al consultorio de su profesional de salud para extraer el sensor.</p> <p>Siga estos pasos:</p> <p>1. Tome el borde del parche adhesivo. Despegue como si fuera un apósito adhesivo.</p>  <p>Siguiente</p>	<p>El Dexcom G6 Pro le avisa cuándo debe reemplazar el sensor.</p>
2		<p>Tome el borde del parche adhesivo.</p> <p>Despegue el parche adhesivo de su cuerpo hacia arriba como un apósito.</p> <p>Colóquelo en la bolsa.</p>

Apéndice A: Resolución de problemas

Este apéndice contiene instrucciones breves para resolver las preguntas más frecuentes. Las mismas se muestran a continuación:

- A.1 Precisión
- A.2 Parche adhesivo
- A.3 Alarma/Alertas: oírlas
- A.4 Alertas comunes
 - Alerta de falta de mediciones
 - Alerta de pérdida de señal
 - No se encuentra el transmisor
- A.5 Finalizar la sesión del sensor antes de tiempo
- A.6 Espacio vacío en el gráfico

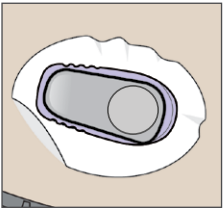
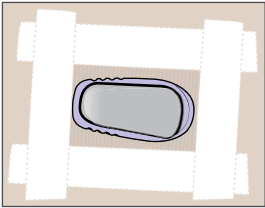
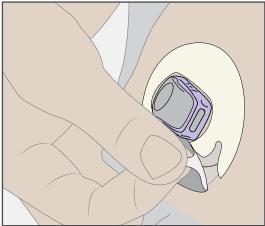
Para obtener información completa sobre la resolución de problemas, consulte la sección de preguntas frecuentes de la guía del usuario en el sitio web de Dexcom (dexcom.com/faq) o comuníquese con el soporte técnico.

A.1 Precisión: las mediciones del sensor G6 Pro no coinciden con los valores del medidor

Los diferentes fluidos corporales dan diferentes valores:

- El medidor de glucosa en sangre mide la glucosa de la sangre.
- El sensor Dexcom G6 Pro mide la glucosa del líquido intersticial.

A.2 Parche adhesivo

Problema	Solución
<p data-bbox="91 247 453 381">El parche adhesivo se despegga del cuerpo</p>  Una ilustración que muestra un parche adhesivo de color gris con un círculo central, parcialmente despegado de la piel. El parche está rodeado por una capa blanca de protección que se está deslizando hacia arriba.	<p data-bbox="484 247 923 427">Una vez que se inserta el sensor, puede evitar que se despegue de la siguiente manera:</p>  Una ilustración que muestra el mismo parche adhesivo ahora completamente adherido a la piel. Está protegido por una cinta adhesiva blanca rectangular que lo cubre por los lados y la parte superior, dejando solo el círculo central del sensor visible.  Una ilustración que muestra una mano aplicando un parche protector circular sobre el sensor. El parche protector es de color gris y tiene un borde adhesivo. La mano está sosteniendo el parche por un lado, mientras lo coloca sobre el sensor. <ul data-bbox="484 1187 923 1702" style="list-style-type: none">• Coloque un parche protector o una cinta adhesiva de grado médico (como Blenderm) sobre el parche adhesivo. No cubra el transmisor.• Consulte a su profesional de salud cómo obtener un parche protector.

A.3 Alarma/Alertas: oírlas

Descripción general

Su aplicación emite pitidos, vibra y muestra un mensaje cuando recibe una alarma/alerta.

No puedo oír las alarmas/alertas

Si no puede oír las alarmas/alertas en su aplicación:

- Asegúrese de que:
 - La aplicación, el *Bluetooth*, el volumen y las notificaciones estén activados.
 - La batería esté cargada.
 - Las pantallas y el parlante funcionen.
 - Si su dispositivo inteligente se reinicia, siempre vuelva a abrir la aplicación Dexcom G6 Pro.
 - Cuando utilice un periférico (auriculares, parlantes *Bluetooth*, reloj inteligente, etc.) es posible que no escuche alarmas/alertas en su dispositivo de visualización principal. Asegúrese de saber dónde las recibirá.
 - Consulte la guía del usuario del Dexcom G6 Pro para conocer las configuraciones sugeridas para dispositivos inteligentes.

El teléfono está silenciado pero la alarma/alertas aún suenan

Si su teléfono está silenciado o en modo No molestar, seguirá recibiendo su Alarma de glucosa baja urgente junto con la mayoría de las alertas para asegurarse de que no se pierda un nivel alto o bajo.

Los usuarios de Android deben activar el permiso No molestar para usar la aplicación.

A.4 Alertas comunes

Problema	Solución
<div><div><div><div><div>Alerta de falta de mediciones</div><div>El sensor no puede medir la glucosa temporalmente.</div></div></div><div><div><div><div>Alerta de falta de mediciones de glucosa</div><div>No recibirá alertas, alarmas ni mediciones de glucosa del sensor.</div></div></div><div><div><div>ACEPTAR</div></div></div></div></div></div>	<div><div><div>1. Compruebe que el transmisor está encajado en el soporte.</div><div>2. Espere por lo menos 3 horas hasta que el G6 Pro solucione el problema.</div><div>3. Si no se corrige luego de 3 horas, comuníquese con Soporte Técnico.</div></div><div><div>Las alarma/alertas o mediciones del G6 Pro volverán a aparecer una vez que el problema esté solucionado. Use su medidor para tomar decisiones de tratamiento.</div><div><div>Toque Ayuda para obtener más información.</div></div></div></div>

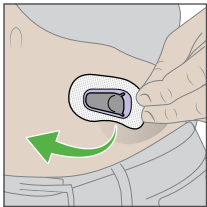
Problema	Solución
<p>Pérdida de señal</p> <p>El dispositivo de visualización y el transmisor no se están comunicando.</p> <div data-bbox="92 499 415 667"> <p>Alerta de pérdida de señal</p> <p>No recibirá alertas, alarmas ni mediciones de glucosa del sensor.</p> <p>ACEPTAR</p> </div>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique que el dispositivo de visualización y el transmisor estén en un rango de 6 metros sin obstrucciones. Si está en el agua, mueva el dispositivo a menos de 6 metros. 2. Espere hasta 30 minutos. 3. Si no se corrige, comuníquese con Soporte Técnico. <p>Las alarma/alertas o mediciones del G6 Pro volverán a aparecer una vez que el problema esté solucionado. Use su medidor para tomar decisiones de tratamiento.</p> <p>Desactive y vuelva a activar el <i>Bluetooth</i>. Espere 10 minutos. Si eso no funciona, reinicie el dispositivo inteligente y vuelva a abrir la aplicación Dexcom G6.</p>

Problema	Solución
<p>No se encuentra el transmisor</p> <p>El G6 no pudo emparejarse.</p> <div data-bbox="91 399 415 739">  </div>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe que el transmisor está encajado en el soporte. 2. Verifique que el número de serie (NS) introducido del transmisor sea correcto. 3. Si no se arregla, es posible que el sensor no se haya insertado correctamente. Inserte un sensor nuevo. Para reemplazarlo, contáctese con su profesional de salud. <p>Las alarma/alertas o mediciones del G6 Pro volverán a aparecer una vez que el problema esté solucionado. Use su medidor para tomar decisiones de tratamiento.</p>

A.5 Finalizar la sesión del sensor antes de tiempo

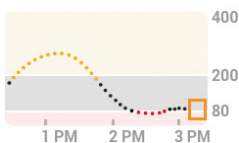
Es posible que desee finalizar la sesión del sensor antes de tiempo. En ese caso, comuníquese con su profesional de salud. Una vez que detenga la sesión, no podrá reiniciarla.

Finalizar la sesión del sensor antes de tiempo

1	<p>Apple</p>  <p>Android</p> 	<p>Consulte siempre a su profesional de salud antes de interrumpir una sesión del sensor.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vaya a Configuración• Toque Transmisor• Toque Emparejar nuevo• Toque Detener sensor
2	 	<p>Extraiga el sensor y el transmisor.</p> <p>Coloque todo en una bolsa y devuélvalo a su profesional de salud.</p>

A.6 Espacio vacío en el gráfico

Cuando no obtiene mediciones del G6 Pro, es posible que su gráfico muestre un espacio vacío del lado derecho en los puntos de tendencia, como en este ejemplo.



Cuando se reanuden las mediciones de su G6 Pro, puede completar hasta 3 horas de mediciones omitidas en el gráfico.

Apéndice B: Pasar por seguridad

¿Le preocupa el equipo de seguridad?

La TSA pide que le informe al oficial de seguridad que está usando un monitor continuo de glucosa y que solicita que le pasen un detector de varilla o que le realicen una inspección total del cuerpo mediante una inspección visual de su sensor y transmisor. Informe al oficial de seguridad que no puede quitarse el sensor porque está insertado debajo de su piel.

Equipo de seguridad a utilizar



Detector de varilla, inspección manual y visual, y paso por un detector de metales de arco: Si usa o lleva su G6, use cualquiera de estos métodos de detección.

Equipos de seguridad a evitar



Escáneres corporales: No pase por un escáner corporal de tecnología de imagen avanzada, como un escáner de ondas milimétricas, cuando use su G6.



Equipos de rayos X: No pase los componentes de su G6 por equipos de rayos X.

En un avión

Para utilizar su dispositivo inteligente para obtener información del sensor de glucosa mientras está en el avión, después de cambiar al modo avión, active el *Bluetooth*.

Para más información

Comuníquese con su aerolínea para conocer sus políticas.

Visite el sitio web de la TSA en [tsa.gov](https://www.tsa.gov).

- Correo electrónico: TSA-ContactCenter@tsa.dhs.gov
- Teléfono: **1.855.787.2227**

Índice

- Alarma de valor de glucosa bajo urgente, 21
- Alarma o Alertas, 30, 31
 - Alarma de valor de glucosa bajo urgente, 21
- Alerta de falta de mediciones, 31
- Alerta de nivel alto, 22
- Alerta de pérdida de señal, 32
- Alerta No se pudo encontrar el transmisor, 33
- Alertas, 30, 31
 - Cambio, 22
- Configuración, 2
- Decisiones de tratamiento, 23
- Error de sensor, 31
- Finalizar la sesión del sensor, 27
- Finalizar la sesión del sensor antes de tiempo, 34
- Flecha de tendencia, 18, 19
- Gráfico
 - Medición, 18
 - Omisión de mediciones, 34
- Las mediciones de glucosa no coinciden con el valor del medidor, 28
- Medición de glucosa alta, 20
- Medición de glucosa baja, 20
- Mensaje de error, 20
- Mensajes en la pantalla, 20
- Pantalla de inicio, 18

- Parche adhesivo, 29
- Precisión, 28
- Recursos, 35
- Resolución de problemas, 28
- Seguridad, 35
- Sesión del sensor
 - Finalizar antes de tiempo, 34
- Silenciado, 34
- Sonido de alarma/alertas durante la visualización
 - El dispositivo está silenciado, 34
- Utilizar el medidor en lugar del G6, 23
- Viaje, 35



© 2022 Dexcom, Inc. Todos los derechos reservados.

Protegido por patentes dexcom.com/patents.

Dexcom y Dexcom G6 son marcas registradas o marcas de Dexcom, Inc.

en los Estados Unidos y en otros países.

Bluetooth es una marca registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Apple es una marca comercial de Apple Inc. Android es una marca registrada propiedad de Alphabet Inc.

Todos los demás nombres de productos o empresas que pueden mencionarse en esta publicación son nombres comerciales, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.



Dexcom, Inc.

6340 Sequence Drive

San Diego, CA 92121 USA

Teléfono: **1.858.200.0200**

Soporte técnico: **1.888.738.3646**

Sitio web: dexcom.com