
INICIO

1 ASPECTOS BÁSICOS DE G7


G7 muestra la información de glucosa en los dispositivos de visualización.

Sensor y aplicador

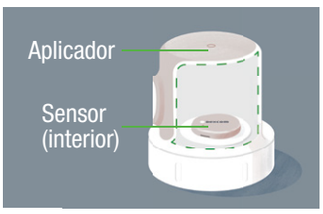

- Durante la configuración, le mostraremos cómo usar el aplicador para insertar el sensor incorporado debajo de la piel.
- El sensor envía una lectura de glucosa a los dispositivos de visualización cada 5 minutos.
- El sensor dura hasta 10 días con un periodo de gracia de 12 horas.

Sobreparche

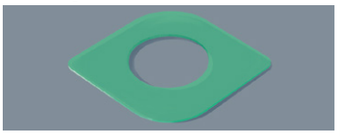

Después de insertar el sensor, debe aplicar el sobreparche para mantener el sensor en el cuerpo.

Instrucciones

Durante la configuración, use las instrucciones de inserción del sensor que se encuentran en la aplicación o consulte *Inserción del sensor* a continuación.

Conecte hasta 3 dispositivos de visualización

Obtenga la información sobre su glucosa en su teléfono, su reloj inteligente y el receptor Dexcom. Puede configurar la aplicación del teléfono, el receptor, o ambos, en cualquier orden. Para obtener información sobre teléfonos inteligentes y sistemas operativos compatibles, visite: **dexcom.com/compatibility**

2 CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL TELÉFONO

Debe tener acceso seguro a internet durante la configuración.

(Para configurar el receptor, consulte las instrucciones del producto en la caja del receptor. Para obtener instrucciones sobre el reloj inteligente, vaya a la Guía del usuario de G7).

1. Primeros pasos

- Escanee el código QR o vaya a App Store® o Google Play para descargar la aplicación Dexcom G7

Android™

Dexcom G7 ★★★★☆ 4.3 K

Apple®

- Abra la aplicación del teléfono
- Ingresar o crear una cuenta

2. Configuración

- Siga las instrucciones de la aplicación del teléfono para configurar la aplicación del teléfono.
- Para obtener instrucciones sobre cómo insertar el sensor, siga las instrucciones de la aplicación del teléfono o consulte *Inserción del sensor* a continuación.
- Después de insertar y emparejar, siga las pautas locales para desechar el aplicador y reciclar el empaque de Dexcom.

3. Adaptación del sensor

El temporizador de adaptación del sensor le indica cuándo comenzará a recibir lecturas y alertas.



4. Sesión del sensor

Vaya a la Guía del usuario de G7 para obtener más información.

Revise la información de seguridad en la *Guía del usuario de G7.*
Todos los gráficos son representativos. El producto puede verse diferente.

INSERCIÓN DEL SENSOR

1. Elija la ubicación del sensor según la edad

¡IMPORTANTE! Si usó sensores G6 en el abdomen, use sensores G7 en la parte posterior de la parte superior del brazo. Los niños de 2 a 6 años también pueden usarlo en la parte superior de los glúteos.

a. De 7 años en adelante:
Usar en la parte posterior del brazo.

b. De 2 años (24 meses) a 6 años:
Usar en la parte posterior del brazo o en la parte superior de los glúteos.

Evite las áreas:

- Con piel floja o sin grasa suficiente para evitar los músculos y huesos
- Que reciben golpes, presión o sobre las que se apoya al dormir
- Que se encuentran a menos de 3 pulgadas del lugar de infusión o inyección
- Cerca de la cintura o con irritaciones, cicatrices, tatuajes o mucho pelo


Para saber cómo mantener el sensor adherido, visite la página **dexcom.com/faqs**.

2. Limpie y seque para que el sensor permanezca colocado


a. Lávese las manos con agua y jabón. Séquese.
b. Frote el lugar con una toallita humedecida en alcohol para eliminar todos los aceites.
c. Deje secar completamente para que el sensor se pegue.

3. Desenrosque la tapa

- No toque la aguja que se encuentra en el interior del aplicador.
- No lo utilice si está roto o abierto.

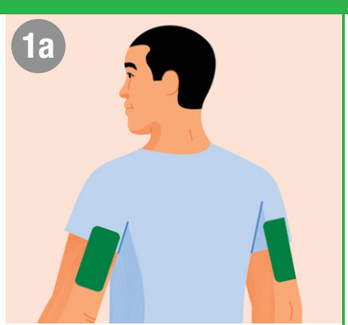



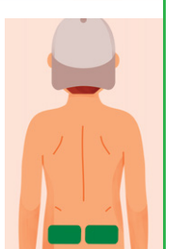







4. Use el aplicador para colocar el sensor

a. Relaje los músculos cerca de la zona de aplicación.
b. (1) Presione el aplicador contra la piel hasta que el anillo transparente desaparezca.
(2) Manténgalo presionado mientras pulsa el botón.

5. Extraiga el aplicador

a. Guarde el aplicador, pues puede que necesite el identificador de su sensor más adelante.


6. Asegúrese de que el sensor esté correctamente fijado

a. Presione la parte superior del sensor durante 10 segundos.
b. Frote alrededor del parche con firmeza 3 veces.

7. Aplique el sobreparche


Debe aplicar el sobreparche para mantener el sensor adherido al cuerpo. Se incluye con las instrucciones en la caja del sensor.


a. Retire con cuidado los dos protectores transparentes, sin tocar el adhesivo blanco. Deje por ahora el protector de color en el sobreparche.
b. Utilice la pestaña del protector de color para colocar el sobreparche con cuidado alrededor del sensor.
c. Frote el sobreparche por todo el contorno.
d. Retire el protector de color, dejando el sobreparche sobre la piel.
e. Vuelva a frotar el sobreparche por todo el contorno.
f. Vuelva a la aplicación del teléfono o al receptor para finalizar la configuración.

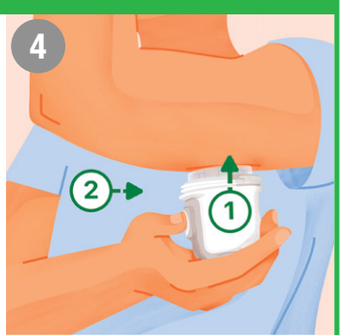







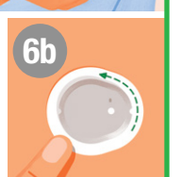

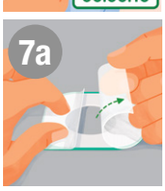

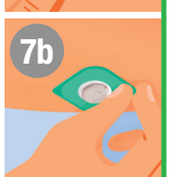



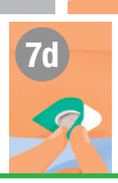



CUIDADOS DEL PARCHE ADHESIVO

Cuanto más tiempo mantenga el parche seco y sin sudor durante las primeras 12 horas, más tiempo quedará adherido a la piel.

Cuando se moje, séquelo delicadamente sin frotar lo antes posible. Si se despega de la piel, recorte las partes despegadas y coloque cinta adhesiva de grado médico.

EXTRACCIÓN DEL SENSOR

Una vez finalizada la sesión del sensor, despegue el parche como si fuera una venda. Para que sea más fácil, siga estos consejos:

- Afloje el borde y empape el parche en aceite corporal, como aceite de bebé o un producto para quitar el adhesivo de la piel (consulte las instrucciones del producto antes de usarlo).
- Use toallitas que quiten el adhesivo de la piel para frotar la piel que queda expuesta a medida que retira el parche
- Pruebe diferentes técnicas para retirarlo:
  - Retire el parche lentamente, doblándolo Sobre sí mismo, en la misma dirección del crecimiento del vello.
  - Estire el borde suelto y empuje sus dedos debajo del parche para despegarlo de la piel.

Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA
1-888-738-3646
dexcom.com

AW-00080-902 Rev 003 MT-00080-902
Rev Date: 05/2024